

# Anleitung Rechnerwechsel – RISE TiaaS Client

## Notwendige Schritte auf dem alten PC

### 1. Das Kartenterminal Pairing aufheben


Öffnen Sie im Internet Browser (z.B. Microsoft Edge) folgenden Link:

<http://localhost:8080>


Klicken Sie im linken Reiter auf den Punkt „Kartenterminals“.

Notieren Sie die Lokale IP-Adresse Ihres Kartenterminals, damit es später auf dem neuen PC wieder hinzugefügt werden kann.

Klicken Sie unter Kartenterminals auf das Kartenterminal. Über die 3 Punkte auf der rechten Seite entfernen Sie das Kartenterminal erfolgreich.

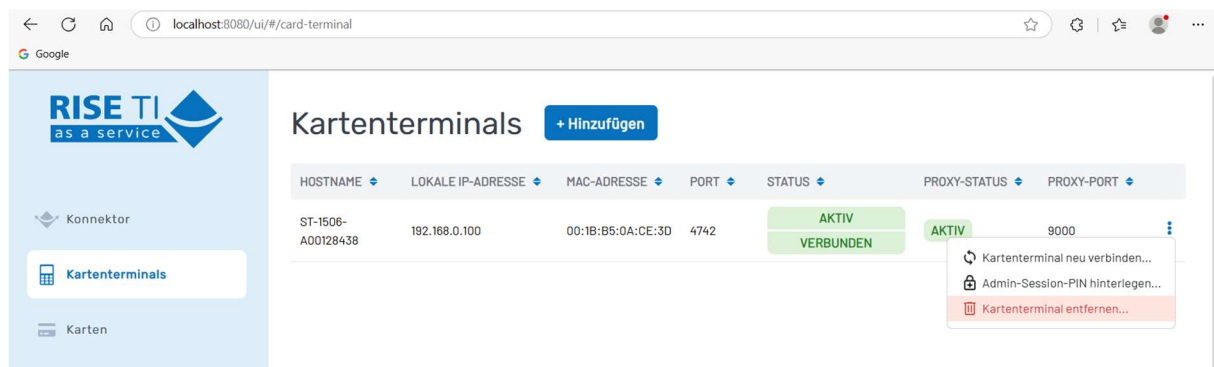

Bestätigen Sie die folgende Meldung mit „Fortfahren“ um das Kartenterminal zu entfernen.

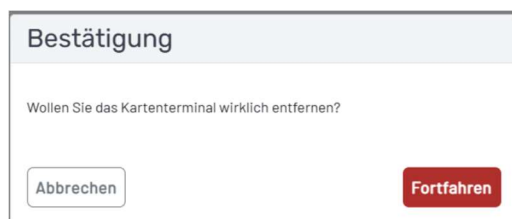

### **ACHTUNG:**

Sollten Sie keinen Zugriff mehr auf den alten PC haben, muss das Kartenterminal über den Support der HASOMED im Rechenzentrum entfernt werden!

## 2. Rise-TlaaS-Client entfernen

Entfernen Sie den RISE-Tiaas-Client als Anwendung.  
Diese finden Sie auf dem PC bei den installierten Anwendungen (Apps).  
Klicken Sie dort auf „Deinstallieren“

### Apps und Features

#### Aliase für die App-Ausführung

Sie können nach Laufwerken suchen, sortieren und filtern. Wenn Sie eine App deinstallieren oder verschieben möchten, wählen Sie sie aus der Liste aus.

Sortieren nach: Name    Filtern nach: Alle Laufwerke

1 App gefunden

	<b>RISE TI as a Service Client 1.15.3-INT</b> 1.15.3-INT	353 MB 24.09.2024
		<input type="button" value="Ändern"/> <input type="button" value="Deinstallieren"/>

Wählen Sie im Deinstallationsassistenten alle Auswahlmöglichkeiten aus:



### ACHTUNG:

Sollten Sie „WireGuard deinstallieren“ vergessen haben, muss WireGuard zusätzlich entfernt werden.


### Apps und Features

#### Aliase für die App-Ausführung

Sie können nach Laufwerken suchen, sortieren und filtern. Wenn Sie eine App deinstallieren oder verschieben möchten, wählen Sie sie aus der Liste aus.

Sortieren nach: Name    Filtern nach: Alle Laufwerke

1 App gefunden

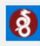	<b>WireGuard</b> 0.5.3	7,94 MB 24.09.2024
		<input type="button" value="Ändern"/> <input type="button" value="Deinstallieren"/>

## Notwendige Schritte auf dem neuen PC

### 1. Rise-TiaaS-Client herunterladen

Laden Sie den **Rise-TiaaS-Client** unter folgender Adresse herunter:

[https://client.rise-tiaas.de/installer/tiaas-client-installer\\_windows.exe](https://client.rise-tiaas.de/installer/tiaas-client-installer_windows.exe)

### 2. Rise-TiaaS-Client Konfigurationsdatei herunterladen

Laden Sie Ihre persönliche Konfigurationsdatei unter folgender Adresse herunter:

<https://hasomed.ti4health.de/ui/portal/customer>

### 3. RISE-TiaaS-Client installieren

Installieren Sie den heruntergeladenen Rise-TiaaS-Client gemäß aktuellem Handbuch des Herstellers:

[https://client.rise-tiaas.de/installer-tiaas/RISE\\_TiaaS\\_Client-Benutzerhandbuch.pdf](https://client.rise-tiaas.de/installer-tiaas/RISE_TiaaS_Client-Benutzerhandbuch.pdf)


### 4. Kartenterminal hinzufügen

Öffnen Sie im Internet Browser (z.B. Microsoft Edge) folgenden Link:

<http://localhost:8080>

Klicken Sie im linken Reiter auf den Punkt „Kartenterminals“.

Fügen Sie das Kartenterminal durch einen Klick auf „Hinzufügen“ mit der zuvor notierten Lokalen IP-Adresse hinzu.

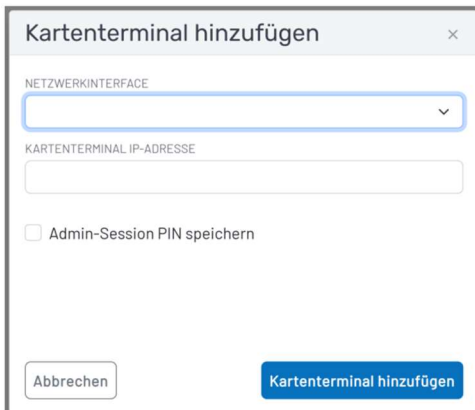A screenshot of a web browser dialog box titled "Kartenterminal hinzufügen". The dialog has a close button (X) in the top right corner. It contains a dropdown menu labeled "NETZWERKINTERFACE" with a downward arrow. Below it is a text input field labeled "KARTENTERMINAL IP-ADRESSE". There is an unchecked checkbox labeled "Admin-Session PIN speichern". At the bottom left is a button labeled "Abbrechen", and at the bottom right is a blue button labeled "Kartenterminal hinzufügen".

Nachdem Sie auf Kartenterminal hinzufügen geklickt haben, bestätigen Sie das Pairing auf dem Kartenterminal, sobald die Meldung auf dem Display erscheint.

## 5. Kartenterminal der Arbeitsumgebung zuweisen


Öffnen Sie im Internet Browser (z.B. Microsoft Edge) folgenden Link:  
<http://localhost:8080>

Klicken Sie im linken Reiter auf den Punkt „Arbeitsumgebung“.

Wählen Sie im oberen Bereich „Arbeitsumgebung einrichten“ aus.

Klicken Sie unter Mandanten auf Ihren Mandanten. (meist „BSNR-PVS“)

Wählen Sie nun das neu hinzugefügte Kartenterminal bei „Lokales Kartenterminal“ aus und klicken Sie auf Speichern.

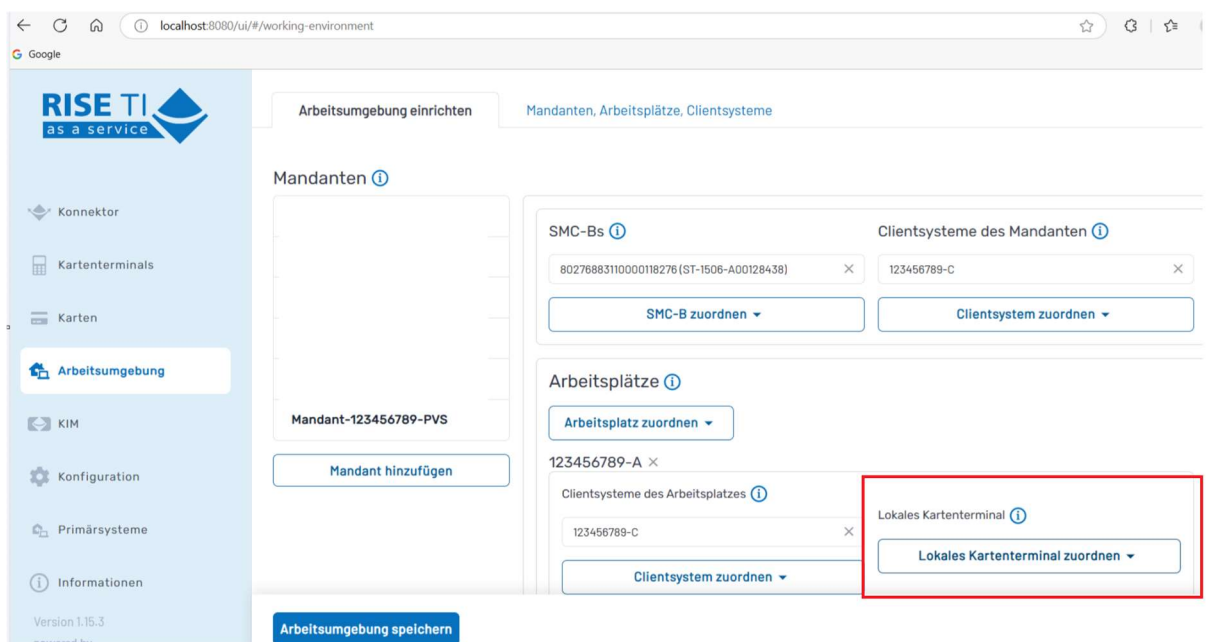

## Hinweise

Weitere Details finden Sie im Handbuch des Herstellers:

[https://client.rise-tiaas.de/installer-tiaas/RISE\\_TlaaS\\_Client-Benutzerhandbuch.pdf](https://client.rise-tiaas.de/installer-tiaas/RISE_TlaaS_Client-Benutzerhandbuch.pdf)